



Lassen Sie Ihre Kunden  
die gesunde Welt von  
**COMPLETE® EASY RUB™**  
erleben

Kontaktlinsenpflege in Bestform

**AMO®**  
Vision. For life.



# COMPLETE® EASY RUB™

Verbessert die Compliance und fördert gesundes Kontaktlinsentragen

Mit 3 Schritten zu besserer Kontaktlinsenpflege

## 1 REIBEN

Löst Bakterien und Ablagerungen



## 2 ABSPÜLEN

Entfernt gelöste Ablagerungen und entzieht Bakterien die Nährstoffquelle


## 3 EINLAGERN

Desinfiziert und schützt vor neuen Ablagerungen


# COMPLETE® EASY RUB™

Bietet Schutz, schafft Vertrauen

Kraftvoll gegen augenpathogene Keime<sup>1</sup>

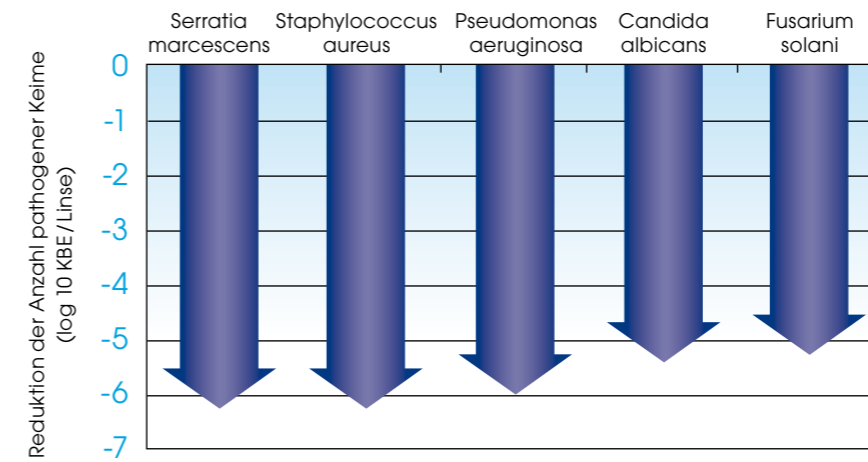

Reduktion der Keimzahl um 99,999%<sup>1</sup>

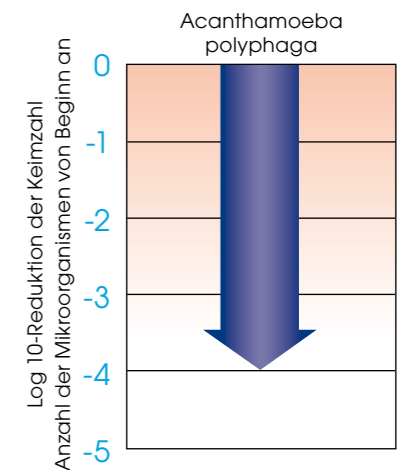

Verbesserter Schutz – die getestete Probe zeigte eine Reduktion um 4 log-Stufen<sup>2</sup>.

## COMPLETE® EASY RUB™

Abspülen sorgt für optimale PHMB- und EDTA-Konzentrationen

- Beide Substanzen zusammen bieten ein breites antibakterielles Spektrum.
- Verbesserte EDTA-Konzentration
  - zerstört die Membran der Bakterien und erleichtert so die effektive Desinfektion der Linse.
  - bindet Eisen und hemmt damit bakterielle Vermehrung.

## COMPLETE® EASY RUB™

Stoppt Bakterien, indem es ihnen die Nahrungsquelle entzieht

- Die Ionenstärke des Phosphat-Puffers unterstützt die Proteinablösung von der Kontaktlinsenoberfläche.
- Elektrolyte, wie sie auch im Tränenfilm enthalten sind (Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>), neutralisieren negative Ladungen und helfen bei der Vermeidung neuer Ablagerungen auf der Kontaktlinsenoberfläche.

# COMPLETE® EASY RUB™


bietet überlegene Verträglichkeit

Besserer Erhalt der Barriere-Funktion der Kornea steigert die Gesundheit beim Kontaktlinsentragen

COMPLETE® EASY RUB™ ist verträglicher für das Hornhautepithel als andere All-in-One-Lösungen<sup>3</sup>.

- Weniger zytotoxisch für die tight junctions\* der Epithelzellen
- Höhere Überlebensrate der Epithelzellen


Überlebensrate der Epithelzellen der Kornea nach 24-stündiger Einwirkung verschiedener Pflege-Lösungen<sup>3</sup>

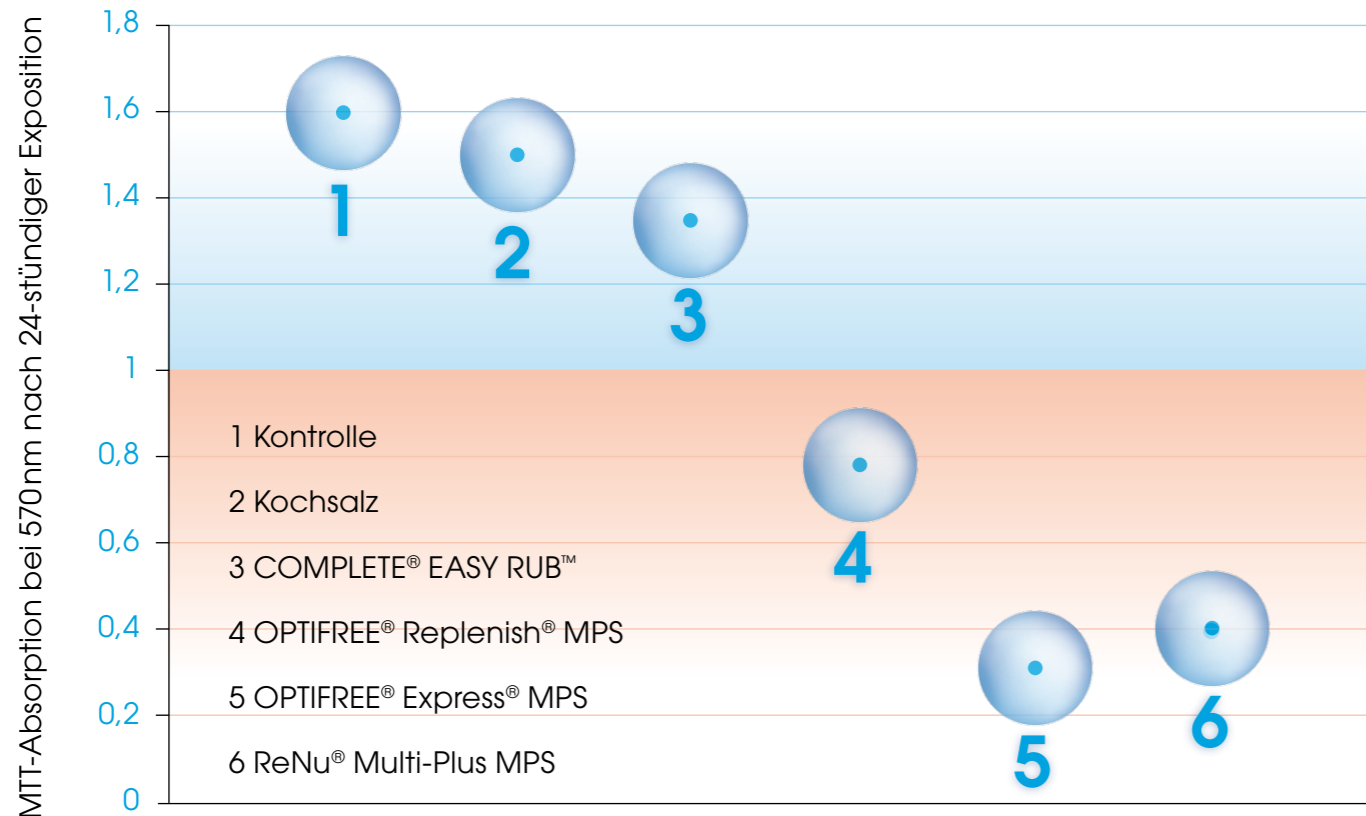


Die Grafik zeigt eine signifikant höhere Überlebensrate in der COMPLETE® EASY RUB™ -Gruppe gegenüber allen anderen Pflegelösungen. Es gab keine statistisch belegbare Differenz zur Kontrollgruppe.

\* Tight-junctions (Membran-Proteinverbindungen) zwischen den Epithelzellen hemmen das Eindringen pathogener Mikroorganismen<sup>4</sup>.


Stark vergrößerte Aufnahmen zeigen das menschliche Hornhautepithel nach der 6-stündigen Einwirkung unterschiedlicher All-in-One-Lösungen<sup>3</sup>

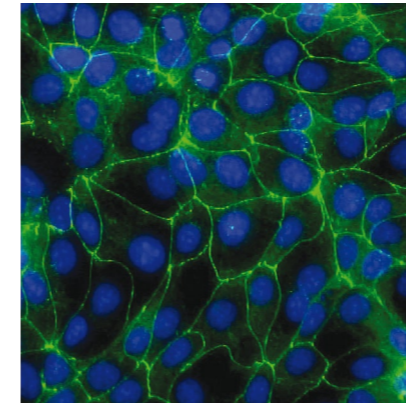


Kontrolle

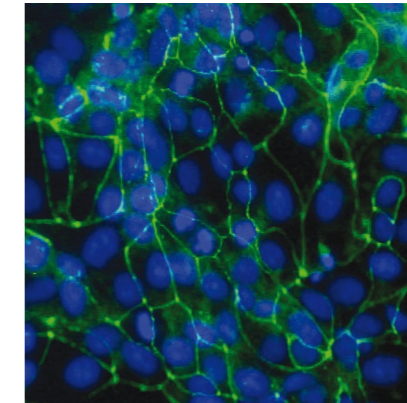


COMPLETE® EASY RUB™

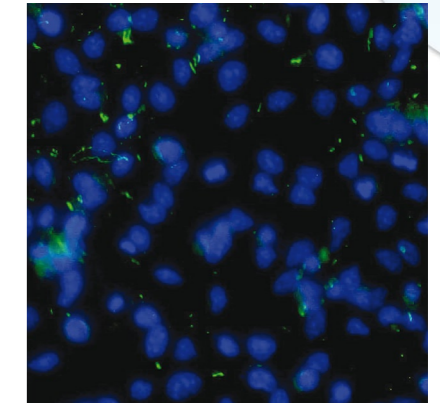

OPTIFREE® Replenish® MPS

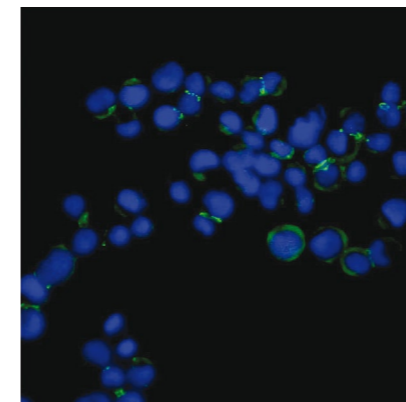

OPTIFREE® Express® MPS

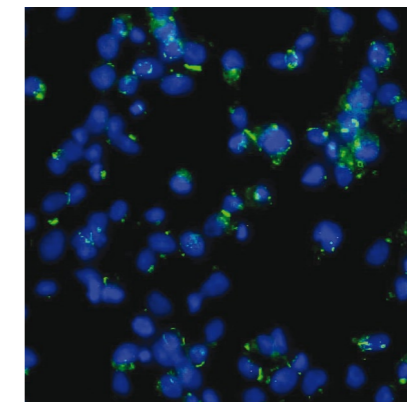

ReNu® Multi-Plus

Alle Aufnahmen sind 200-fach vergrößert.

Die grün gefärbten Bereiche zeigen die aus Protein bestehende Zonula Occludens -1 (ZO-1). Diese sollte jede Zelle komplett und gleichmäßig umhüllen.


Die blau gefärbten Zellen sollten möglichst gleich in Form und Größe sein.

# COMPLETE® EASY RUB™

Biokompatibel mit Kontaktlinsen der neusten Generation

Nur geringe korneale Stippung nach 4-stündigem Tragen von Silikonhydrogel (SiHy)-Kontaktlinsen<sup>6</sup>

- 83% der untersuchten Augen zeigten überhaupt keine oder nur sehr geringe korneale Stippung.
- 94% zeigten nur leichte korneale Stippung.

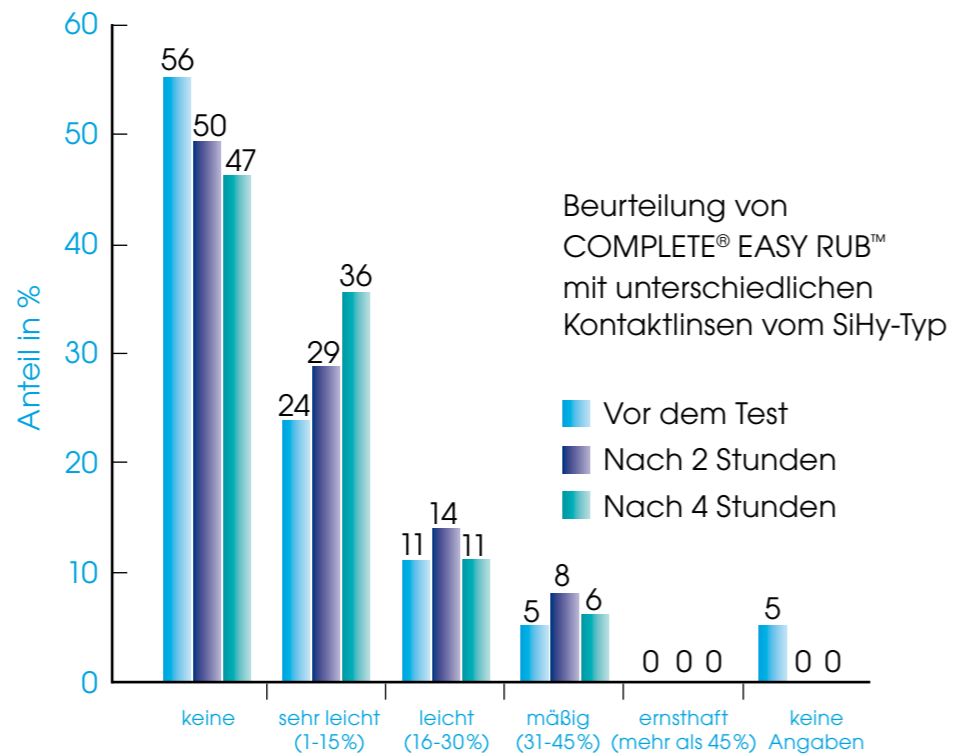

# COMPLETE® EASY RUB™

Hervorragender Komfort und einfache Anwendung

Die einzige All-in-One Lösung mit Poloxamer 237 für eine verbesserte Stabilität des Tränenfilms und lang anhaltenden Komfort.

Verwender beurteilen den Tragekomfort nach 4-stündigem Tragen von SiHy-Kontaktlinsen<sup>6</sup>:

- 88% beurteilten den Tragekomfort mit „gut bis sehr gut“.
- 42% beurteilten den Tragekomfort mit „sehr gut“.

93% der Verwender im Test gaben an, COMPLETE® EASY RUB™ sei einfach in der Anwendung<sup>5</sup>.

# So unterstützen wir Ihren Abverkauf

Aufmerksamkeitsstarkes Poster für Straßenreiter



Demonstrationselement Pflegeschritte im „Anschauungsunterricht“.



Starter-Set

Eine nette Aufmerksamkeit zum Start in gesundes Kontaktlinsentragen.



Ständig aktuelle Service-Website

Hier finden Sie alles zu AMO-Produkten und was dazu gehört.



[www.amo-kontaktlinsenforum.de](http://www.amo-kontaktlinsenforum.de)  
Passwort: Eyecare

# COMPLETE® EASY RUB™

## Mehr Effizienz in der Kontaktlinsenpflege

Reiben, Abspülen und Einlagern verbessert die Pflege und erhöht die Verwendungsicherheit

## Kraftvolle Desinfektion

99,999% ige Wirksamkeit gegen Bakterien bei empfohlener Anwendung

## Überlegene Verträglichkeit

Verträglicher für die Hornhautoberfläche als andere All-in-One-Lösungen

## Aufmerksamkeitsstarke Abverkaufsunterstützung

Zielgruppengerecht und wirkungsvoll

### Quellen:

1. AMO data on file, 2007. Advanced Medical Optics, Inc., Santa Ana, CA. Studiendesign: 10 Sekunden abspülen, 6 Stunden einlagern, 10 Sekunden abspülen.
2. AMO data on file, 2007. Advanced Medical Optics, Inc., Santa Ana, CA. Studiendesign: reiben, abspülen, einlagern.
3. Data on file, 2007. Pflugfelder MD, Baylor College of Medicine, Houston, TX.
4. Sugrue SP, Zieske JD. ZO1 in corneal epithelium: association to the zonula occludens and adherens junctions. Exp Eye Res. 1997;64(1):11-20.
5. AMO data on file, 2007. Advanced Medical Optics, Inc., Santa Ana, CA.
6. AMO data on file, 2007. Advanced Medical Optics, Inc., Santa Ana, CA.
7. Bennett ES. Review of Optometry. 2007; April 15.

AMO Germany GmbH, Rudolf-Plank-Straße 31, 76275 Ettlingen  
AMO Switzerland GmbH, Churerstrasse 160 B, 8808 Pfäffikon SZ

CE 0050 COMPLETE® EASY RUB™

COMPLETE, Easy Rub, das COMPLETE und das AMO Logo sind eingetragene Markenzeichen der Advanced Medical Optics, Inc.

OPTIFREE, RepleniSH und Express sind eingetragene Markenzeichen von Alcon Laboratories, Inc. ReNu ist ein eingetragenes Markenzeichen von Bausch & Lomb, Inc.

2008.04.11-EC406

© 2008 Advanced Medical Optics, Inc.

